




# LR150 Handbuch

## ACHTUNG!

Bitte benutzen Sie das Light Relief® Gerät für ein- bis zwei 15-Minuten Durchgänge pro Benutzung und zwei Wochen lang jeden Tag, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist möglich, bereits nach einigen Tagen Entspannung zu verspüren.

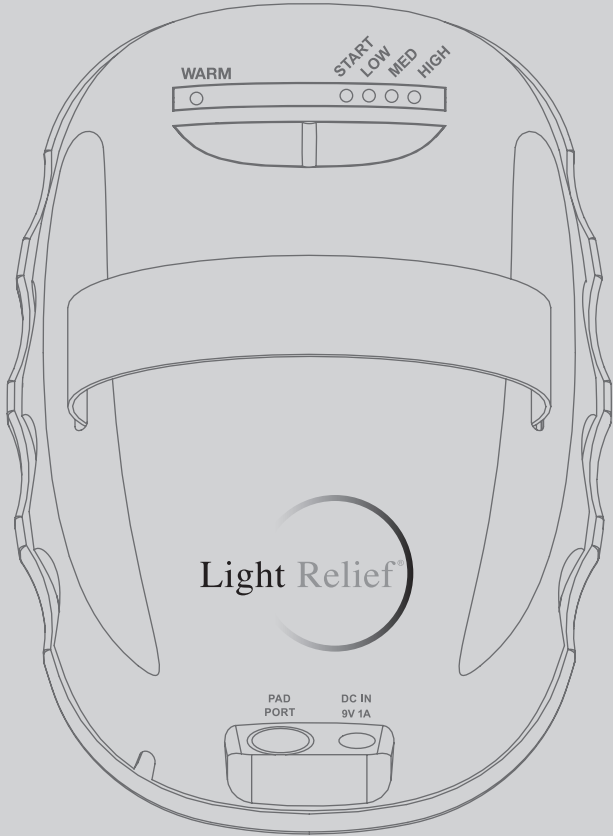

J]Y'Yb'8 Ub\_žXUgg'g]Y'g]W 'Z f'X]Y'  
 @[ \ hFY]YZ' '9]b\ Y]hYb]gW ]YXYb'  
 \ UVYb"à fY'Ni Z]YXYb\ Y]h]ghi bg'gY f'  
 k ]W h] "8 Yf' @[ \ hFY]YZ' '5 ddUfUhi  
 k ]fX'Ya dZ\ `Yb'ni f' \_i fnnY]h] Yb'  
 GW a Yfn`]bXYfi b[ 'j cb'  
 Ai g\_Yj YfgdUbbi b[ YbžAi g\_Y!'i bX'  
 ; Y'Yb\_gW a YfnYb"6 ]hY'VYbi hYb'G]Y'  
 XUg' @[ \ hFY]YZ' ; Yf} hZ f'Y]b`V]g'  
 nk Y]'!A ]bi hYb'8 i fW [ ] b[ Y'dfc'  
 6 Ybi hmi b[ 'i bX'nk Y]'K cW Yb`Ub[ '  
 ʎXYb`HU] ži a `X]Y'VYghYb'9f[ YVb]ggY'  
 ni `Yfn]Y'Yb"9g' ]ghia "[ `]W žVYfY]hg'  
 bUW `Y]b][ Yb`HU] Yb'9b]gdUbbi b[ 'ni '  
 j Yfgd~ fYb"8 Yf' @[ \ hFY]YZ' '5 ddUfUhi  
 ]gh\_Y]b'9fgUm'Z f'Y]bY'  
 j cf[ YgW f]YVYbY'6 ʎ UbX'i b[ "6 Y]'  
 ghUf\_Yb`cXYf`andauernden  
**Schmerzen bitte einen Arzt  
 aufsuchen. Bitte lesen Sie die  
 folgende Anleitung vor Benutzung  
 gut durch, um den bestmöglichen  
 Nutzen der Light Relief® Einheit zu  
 erzielen.**

## Inhaltsverzeichnis

01	ALLES ÜBER DIE LIGHT RELIEF® EINHEIT
01	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
02	MEDIZINISCHE VORKEHRUNGEN
03	BESTANDTEILE IHRER LIGHT RELIEF® EINHEIT
04	DAS LIGHT RELIEF® LR150
05	LEISTUNGEN & NUTZUNGSHINWEISE
05	BEDIENUNGSANLEITUNG <i>Positionierung der Light Relief® Einheit</i> <i>Einschalten der Light Relief® Einheit</i> <i>Frequenzeinstellung</i> <i>Wärmeeinstellung</i> <i>Anwendung der Light Relief® Einheit</i>
08	BATTERIEWARTUNG <i>Benutzung von Einwegbatterien</i> <i>Benutzung des aufladbaren Batterie-Sets</i> <i>Aufladen des aufladbaren Batterie-Sets</i> <i>Benutzung des Power Adapters</i>
10	DAS LIGHT RELIEF® ZUBEHÖR <i>Das große, flexible Light Pad™ Zubehör</i> <i>Der Light Relief® Autoadapter</i> <i>Das aufladbare Batterie-Set</i>
12	BESTELLEN DES LIGHT RELIEF® ZUBEHÖRS
12	PROBLEMBEHEBUNG
13	HAFTUNGSAUSSCHLUSS
14	GARANTIE
14	KONTAKTDATEN FÜR DEN GARANTIESERVICE
15	SCHIEDSVEREINBARUNG

## ALLES ÜBER DIE LIGHT RELIEF® EINHEIT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Light Relief® Einheit. Die Light Relief® Einheit wird zur Schmerzlinderung genutzt, indem das Gerät Energie durch ein Infrarotspektrum abgibt. Es setzt gezielt Wärme ein, um die Gewebetemperatur zu steigern, bzw. zu erhalten. Setzen Sie das Light Relief® dort ein, wo es für Ihren persönlichen Komfort am besten geeignet ist und Sie Ihre Verspannungen, Muskel- und Gelenkschmerzen dadurch entspannen können.

**Anmerkung:** Die Light Relief® Einheit besitzt sowohl sichtbares, rotes und blaues LED-Licht als auch Infrarotlicht, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Auch wenn die Hälfte der Lichter ausgeschaltet scheinen, können Sie sich sicher sein, dass das Light Relief® richtig funktioniert und Ihnen die maximale Schmerzlinderung bietet.

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Bitte lesen Sie für Ihre eigene Sicherheit die folgenden Sicherheitsvorkehrungen gut durch, bevor Sie die Light Relief® Einheit anwenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen durch, bevor Sie das Light Relief® nutzen.
- Die Light Relief® Einheit ist ein technisches Gerät, bei dem Vorsicht geboten ist, wenn man das Gerät einsteckt und / oder auflädt. Nur in Steckdosen mit 120V / 60Hz einstecken und immer den von Light Relief® bereit gestellten Power Adapter benutzen.
- Das Light Relief® immer von Wasser fernhalten, da es nicht vor Feuchtigkeitseintritt geschützt ist. Das Gerät nicht in die Nähe von Badewannen, Spülbecken, Toiletten, oder anderen Orten stellen / aufbewahren, an denen es zu Wasserkontakt kommen könnte. Wenn die Light Relief® Einheit ins Wasser fällt, während sie an Strom angeschlossen ist, greifen sie NICHT nach dem Gerät.
- Vor dem ein- und ausstecken des Power Adapters, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die rechte Seite des blauen Knopfs auf der Oberseite des Geräts drücken, bis alle Lichter erloschen sind.
- Die Light Relief® Einheit ist aus elektrischer Schalttechnik aufgebaut. Große Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Gerät auf Ihrem Körper platzieren oder entfernen.
- Halten Sie die Light Relief® Einheit, wenn möglich, immer flach. Vermeiden Sie starkes und unnötiges Verbiegen des Gerätes.
- Legen Sie das Gerät nicht flach auf Plastik, Holz, oder andere hitzeempfindlichen Oberflächen. Die Hitze des Gerätes könnte diese beschädigen.

- Wenden Sie die Light Relief® Einheit nicht auf nasser oder feuchter Haut an. Die Elektronik könnte bei Wasserkontakt beschädigt werden.
- Wenn Sie das Gerät reinigen, tauchen Sie es NIE in und reinigen Sie es NIE mit Wasser. Bitte benutzen Sie immer einen trockenen Pinsel, um das Gerät zu reinigen.
- Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht genutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und entfernen Sie den Power Adapter aus der Steckdose.
- Einwegbatterien müssen richtig eingeführt, benutzt und entsorgt werden. Der Akku kann explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn er rückwärts eingesetzt, aufgeladen, mit einem anderen Batterietyp gemischt, in Brand gesteckt oder demontiert wird.
- Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig. Entfernen Sie nicht das Etikett an der Batterie.

## MEDIZINISCHE VORKEHRUNGEN:

- Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Wärmefunktion nutzen.
- Wenden Sie das Gerät nicht direkt an offenen Wunden an, da Wärme die Blutzirkulation stimulieren und Blutungen auslösen könnte.
- Nutzen Sie es vorsichtig, da Verbrennungen bei ungerechter Nutzung auftreten können.
- Das Gerät darf nicht von schlafenden Personen oder von Personen benutzt werden, die nicht bei Bewusstsein sind.
- Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht das Gerät benutzen – es handelt sich bei dem Gerät nicht um ein Spielzeug.
- Wenden Sie das Gerät nicht an Säuglingen an.
- Wenden Sie das Gerät nicht an Bereichen der Haut an die verletzt, offen, oder empfindlich sind.
- Bitte sitzen und liegen Sie NICHT auf dem Gerät oder lehnen sich gegen dieses. Falten und zerdrücken Sie es nicht.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in Verbindung mit Salben oder Einreibemitteln, die wärmeerzeugende Inhaltsstoffe enthalten. Die Haut könnte verbrennen.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht des Gerätes und vermeiden Sie direkten Augenkontakt.
- Wenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit schlechter Durchblutung an, da Verbrennungen entstehen könnten.
- Wenn Sie die Light Relief® Einheit mit der eingeschalteten Wärmefunktion anwenden und die Temperatur Ihnen zu warm erscheint, schalten sie die Wärmefunktion umgehend ab. Wenn die Hitze Unbehaglichkeit oder andere unangenehme Gefühle auslöst, brechen Sie die Anwendung umgehend ab.

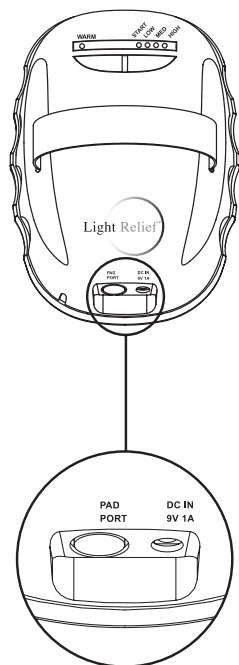


Fig. 1

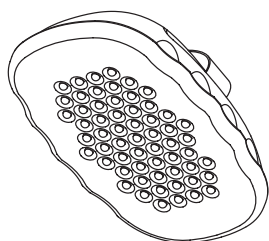



Fig. 2

### BESTANDTEILE IHRER LIGHT RELIEF® EINHEIT

Das Light Relief® LR150 Produkt besteht aus einer tragbaren Basiseinheit und einer flexiblen Pad-Vorrichtung, genannt Light Pad™. In der tragbaren Basiseinheit befinden sich die Haupterschaltungstechnik, ein graphischer Bildschirm, Steuerungsknöpfe, Batterien und zwei Öffnungen / Ports (siehe Fig. 1). In den Power Port werden die elektrischen Stromadapter und der Light Relief® Autoadapter eingesteckt. In den Pad Port werden die flexible Pad-Vorrichtung und / oder das große Light Pad™ Zubehör angeschlossen (siehe unten unter „Das Light Relief® Zubehör“)

Die Light Relief® Einheit enthält eine Anzahl an 59 gefärbten und Infrarotlicht abgebenden LEDs (24 Infrarot, 31 rot, 4 blau). Die LEDs geben einen sanften Strahl an schmerzlindernder Energie ab. (siehe Fig. 2)

Das Gerät besitzt einen Wärmeknopf, der, wie gewünscht nach Ihrem eigenen Wohlbefinden, ein- und ausgeschaltet werden kann, indem Sie die linke Seite des blauen Knopfs auf der Oberseite des Gerätes betätigen. Die Wärmeeinstellung funktioniert erst, wenn Sie eine der vier Wärmeeinstellungen ausgewählt haben. Die vier Frequenzen (**START**, **LOW**, **MED** und **HIGH**) können ausgewählt werden durch Drücken der rechten Seite des blauen Knopfes auf der Oberseite des Gerätes. (siehe Fig. 3)

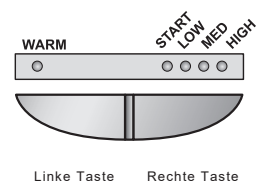

Linke Taste    Rechte Taste

Fig. 3

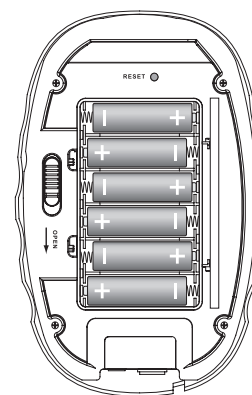


Fig. 4

### DAS LIGHT RELIEF® LR150

Das Light Relief® LR150 (Fig. 4) arbeitet mit sechs AA Einwegbatterien, sechs wieder aufladbaren Batterien (erhältlich als unser Aufladbares Batterie-Set Zubehör, siehe unter „Das Light Relief® Zubehör“ in dieser Anleitung), oder mit einem Power Adapter.

Das LR150 arbeitet auch mit unserem Light Relief® Autoadapter, der mit dem Zigarettenanzünder ihres Autos funktioniert, um Ihnen auch unterwegs die beste Entspannung zu bieten. Siehe unter „Das Light Relief® Zubehör“ in dieser Anleitung.

**Hinweis:** Wenn Sie Batterien benutzen, müssen diese vorher vollstens aufgeladen sein, bevor Sie das Gerät benutzen. (Aufladbare Batterien sollten 10 Stunden vor Benutzung vollstens aufgeladen sein.) Für mehr Details siehe „Erhaltung der Batterien“ in dieser Anleitung.

**LEISTUNGEN & NUTZUNGSHINWEISE:**

- Setzen Sie das Light Relief® dort ein, wo es für Ihren persönlichen Komfort am besten geeignet ist und Sie Ihre Verspannungen, Muskel- und Gelenkschmerzen dadurch entspannen können.
- Bringt kurzweilige Entspannung von geringen Schmerzen in Muskeln und Gelenken.
- Unterstützt die Entspannung der Muskeln
- Hilft kurzzeitig eine verbesserte Bewegungsfreiheit- und Reichweite herzustellen, durch Muskelentspannung und kurzweilige Schmerzlinderung.
- Schafft eine kurzweilige Steigerung der Durchblutung.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die „Sicherheitsvorkehrungen“ und die „medizinischen Vorkehrungen“ gut durch, bevor Sie das Gerät benutzen.**

Vor der Benutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die flexible Light Pad™ Vorrichtung mit dem Light Relief® verbunden ist, indem Sie den Pad-Stecker in das Pad Port / die Pad Öffnung stecken (siehe Fig. 5).

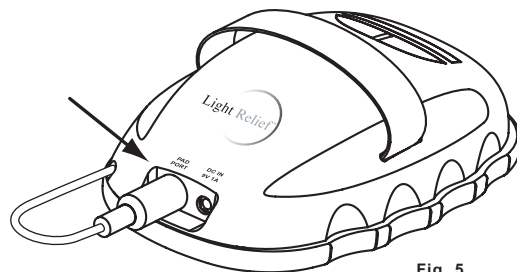


Fig. 5

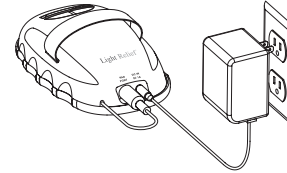


Fig. 6

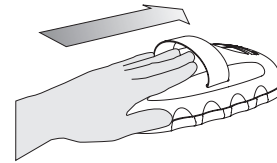


Fig. 7

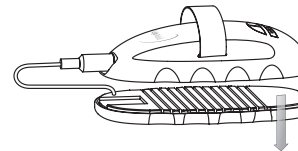


Fig. 8

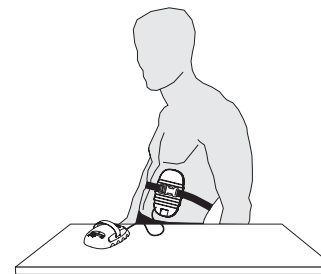


Fig. 9

Wenn Sie den Power Adapter benutzen:

- Stecken Sie den kleinen Adapterstecker in den Netzanschluss an Ihrer Light Relief® Einheit, wie in Fig. 6 und stecken Sie den Adapterstecker in eine Wandsteckdose (120V, 60Hz). Wenn das Netzteil an das Gerät angeschlossen ist, wird die Stromversorgung über Batterien automatisch getrennt.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihre Light Relief® Einheit mit unserem exklusiven Light Relief® Autoadapter oder unserem aufladbaren Batterie-Set Zubehör (siehe „Das Light Relief® Zubehör“ für Bestellinformationen) nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an den beigelegten Beihelfer. Die Aufstellhinweise vor der Verwendung sind den beiliegenden Einsätzen zu entnehmen.

Wenn Sie Batterien verwenden:

Siehe Abschnitt „Batteriewartung“ in dieser Anleitung und legen Sie die Batterien gemäß der Anweisungen ein.

**Positionieren der Light Relief® Einheit**

Sie können das Light Relief® Gerät benutzen, indem Sie es in der Hand halten oder es an der Hand befestigen, indem Sie Ihre Finger unter dem kleinen Gummiband auf dem Gerät legen (siehe Fig. 7) und es über die zu behandelnde Stelle positionieren.

Sie können den flexiblen Light Pad™ Aufsatz auch von der Light Relief® Einheit abnehmen (Fig. 8). Mit dem mitgelieferten langen Körpergurt können Sie den flexiblen Light Pad™ Aufsatz am Körper befestigen (Fig. 9). Legen Sie das Handmodul auf einen Tisch, auf Ihren Schoß oder auf eine sichere angrenzende Fläche. Wenn Sie den flexiblen von Light Pad™ Aufsatz mit dem mitgelieferten langen Gurtband am Körper befestigen, achten Sie darauf, dass der Druck nicht zu hoch oder unangenehm ist.

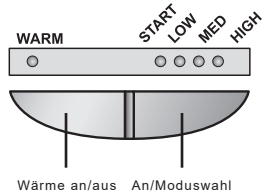


Fig. 10

### Einschalten der Light Relief® Einheit:

Schalten Sie das Light Relief® ein, indem Sie die rechte Seite der blauen Taste auf der Oberseite des Gerätes drücken (Fig. 10).

### Frequenzeinstellung:

Wählen Sie eine gewünschte Frequenzeinstellung, indem Sie die rechte Seite der blauen Taste drücken, die Sie durch vier Modi führt, START, LOW, MED und HIGH. Wir empfehlen Ihnen, immer mit der Einstellung HIGH zu beginnen, aber Sie sollten experimentieren, um zu sehen, was für Sie am besten funktioniert. Im START-Modus zeigen Ihnen die Blinkleuchten an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist der einzige Modus, in dem die Lichter blinken. Der START-Modus arbeitet mit einer sehr niedrigen Frequenz und die Modi LOW, MED und HIGH erhöhen die LED-Frequenz. Sie können verschiedene Frequenzeinstellungen ausprobieren, bis Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung festgelegt haben.

### Wärmeeinstellung:

Nachdem Sie eine Frequenzeinstellung gewählt haben, können Sie die Wärmeeinstellung auswählen, indem Sie die linke Seite der blauen Taste drücken. Dadurch wird die Wärmefunktion ein- oder ausgeschaltet. Sie können die Wärme einstellen, indem Sie die Wärmefunktion je nach Ihrem persönlichen Komfort ein- oder ausschalten. Wenn das Light Relief® mit eingeschalteter Warmfunktion betrieben wird und sich die Temperatur zu warm anfühlt, schalten Sie die Wärmefunktion sofort aus.

**Hinweis:** Die Light Relief® Einheit enthält sowohl sichtbare rote und blaue LED-Leuchten als auch Infrarot-LED-Leuchten, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Hälfte der Leuchten "aus" zu sein scheint, Ihr Light Relief® Gerät funktioniert einwandfrei.

### Anwendung der Light Relief® Einheit:

Nachdem Sie eine Frequenzeinstellung und eine Wärmeeinstellung gewählt haben (Fig. 10), halten Sie das Light Pad™ an die zu behandelnde Stelle oder bewegen Sie das Light Pad™ um die zu behandelnde Stelle (das Licht sollte tatsächlich die Haut berühren). Wenn das Light Pad™ bei Berührung kühl ist, kann es etwa zehn bis zwölf Minuten dauern, bis die Haut auf die gewünschte Temperatur erwärmt ist. Empfohlene Behandlungszeit beträgt 15 bis 20 Minuten. Daher empfehlen wir, das Light Relief® für ca. ein bis zwei fünfzehn Minuten Zyklen pro Anwendung zu verwenden. Wenn sich die Temperatur zu warm anfühlt, drücken Sie die Warmtaste, um die Warmfunktion auszuschalten. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Sie können es für einen zweiten Zyklus sofort wieder einschalten.

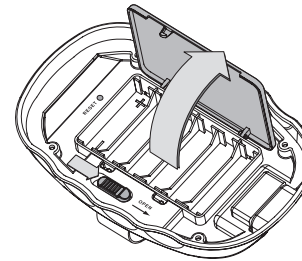


Fig. 11

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Wenn Sie den flexiblen Aufsatz Light Pad™ an das Gerät zurückgeben und sie den flexiblen Aufsatz Light Pad™ von der Light Relief®-Einheit gelöst haben und fertig damit sind, kann der flexible Aufsatz Light Pad™ in der umgekehrten Weise, wie er entfernt wurde, wieder an der Light Relief®-Einheit befestigt werden.

### BATTERIEWARTUNG:

Das Light Relief® LR150 arbeitet mit Einweg-AA-Alkali-Batterien, den optionalen wiederaufladbaren Batterien oder mit einem Netzteil. Wir empfehlen Ihnen, das Light Relief®-Gerät nach Möglichkeit mit dem Netzteil zu verwenden und die Batterien nur auf Reisen zu verwenden. Bei voller Hitze kann das Light Relief®-Gerät für bis zu sechs 15-minütige Behandlungen verwendet werden, bevor die Batterien ausgetauscht werden müssen. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.

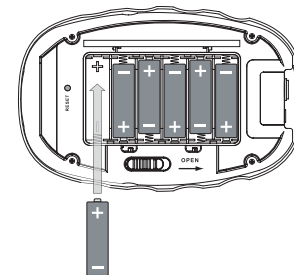


Fig. 12

**Benutzung von Einwegbatterien:**

Um die Batterien einzusetzen, öffnen Sie das Batteriefach wie in **Fig. 11** gezeigt. Legen Sie AA-Alkalibatterien wie in **Fig. 12** gezeigt ein. Wenn Sie Batterien in das Batteriefach einsetzen, stellen Sie sicher, dass die Batterien in einer Konfiguration platziert sind, die es ermöglicht, dass das Plus (+) und Minus (-) korrekt mit den Markierungen im Inneren des Batteriefachs ausgerichtet ist. Ersetzen Sie alle Batterien durch frische AA-Alkalibatterien, wenn die Beleuchtung des Light Relief®-Gerätes schwach ist oder wenn sich die Stromversorgung aufgrund von niedrigem Stromverbrauch automatisch abschaltet. Um Einwegbatterien zu ersetzen, entfernen Sie den Light Pad™ Aufsatz, wie in den Gebrauchsanweisungen beschrieben, entfernen Sie dann die alten Batterien und legen Sie neue Batterien wie zuvor beschrieben ein. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.

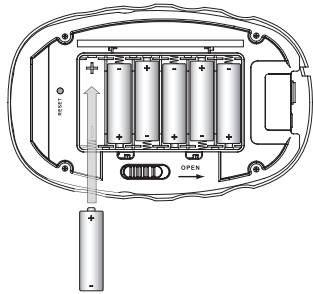


Fig. 13

**ACHTUNG:** Einwegbatterien müssen fachgerecht installiert, verwendet und entsorgt werden. Der Akku kann explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn er falsch eingesetzt, aufgeladen, mit einem anderen Batterietyp gemischt, in Brand gesteckt oder demontiert wird. Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Entfernen Sie nicht das Batterieetikett. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.

**Benutzung des aufladbaren Batterie-Sets:**

Um Ihre wiederaufladbaren Batterien zu verwenden, legen Sie sie wie in **Fig. 13** gezeigt in das Batteriefach ein und legen Sie die Batterien so ein, dass die Plus- (+) und Minus- (-) Enden korrekt mit den Markierungen im Inneren des Batteriefachs ausgerichtet sind, und schließen Sie die Tür zum Batteriefach.

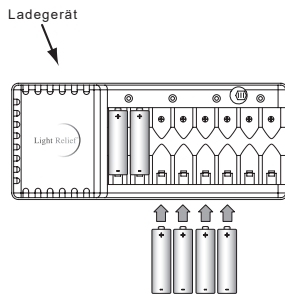


Fig. 14

**Aufladen des aufladbaren Batterie-Sets:**

Um die Akkus aufzuladen, legen Sie sie wie in **Fig. 14** gezeigt ein und schließen Sie dann den Festsstecker des mitgelieferten Netzteils an die Buchse auf der Rückseite des Ladegeräts an. Schließen Sie das Netzteil wie in **Fig. 15** gezeigt an die Steckdose an. Laden Sie die Batterien auf, wenn die Lampen am Light Relief® Gerät schwach sind oder wenn sich der Strom aufgrund von niedrigem Stromverbrauch automatisch abschaltet.

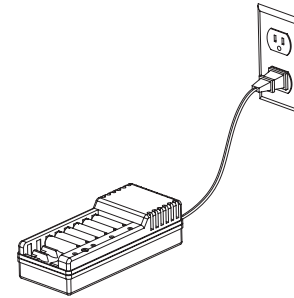


Fig. 15

**Benutzung des Power Adapters:**

Um das Netzteil zu verwenden, stecken Sie das Netzteil wie in **Fig. 16** gezeigt in den Stecker des Light Relief® Gerätes und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose (120V, 60 Hertz). Wenn das Netzteil an das Gerät angeschlossen ist, trennt das Gerät automatisch die Stromversorgung von den Batterien. Entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

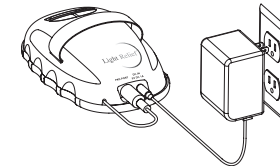


Fig. 16

**DAS LIGHT RELIEF® ZUBEHÖR**

Steigern Sie den Komfort Ihres Light Relief® Gerätes mit den folgenden exklusiven Accessoires. Kontaktieren Sie uns unter **800-743-9852** oder besuchen Sie unsere Webseite auf [www.lightrelief.com](http://www.lightrelief.com), um Ihr Zubehör noch heute zu bestellen.

**Das große Light Pad™ Zubehör:**

Unser flexibles Zubehör Large Light Pad™ (Fig.17) wurde speziell entwickelt, um größere Körperbereiche wie Rücken, Beine, Schultern usw. zu entspannen. Wenn Sie bereits Ihr flexibles Zubehör Large Light Pad™ bestellt und erhalten haben, folgen Sie einfach den Anweisungen, die Ihrem Zubehör "LARGE LIGHT PAD™" beiliegen und bereiten Sie sich auf noch mehr wohltuende Entspannung und Komfort vor.

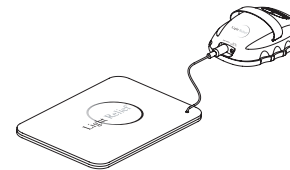


Fig. 17



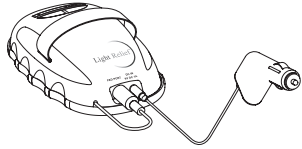


Fig. 18

Nachdem Sie Ihr flexibles Zubehör für das Large Light Pad™ gemäß den Gebrauchsanweisungen eingesteckt haben, finden Sie in dieser Anleitung wichtige allgemeine Hinweise zum Light Relief®.

#### **Der Light Relief® Autoadapter:**

Jetzt können Sie Ihre Light Relief® Einheit in Ihrem Auto oder Wohnmobil verwenden, wenn Sie Ihre Light Relief® Einheit mit unserem Light Relief® Autoadapter verwenden (Fig. 18). Stecken Sie es einfach in den Zigarettenanzünder Ihres Autos und Sie werden eine wohltuende Entspannung spüren, wenn Sie unterwegs sind.

Nachdem Sie Ihren Light Relief® Car Adapter gemäß den Gebrauchsanweisungen eingesteckt haben, finden Sie in dieser Anleitung wichtige allgemeine Anweisungen für die Light Relief® Geräte.

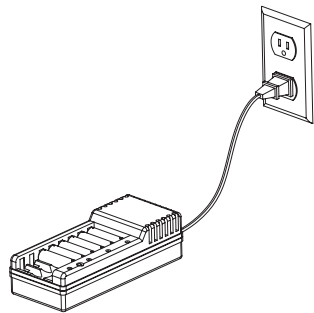


Fig. 19

#### **Das aufladbare Batterie-Set:**

Bestellen Sie noch heute unser Akkusset und Sie können Geld und den Aufwand für den Batteriewechsel durch unser Akkusset sparen.

Wenn Sie Ihr Akkusset bereits bestellt und erhalten haben (Fig. 19), lesen Sie bitte den beiliegenden Einsatz und den Abschnitt "RECHARGEABLE BATTERY SET" im Abschnitt "BATTERY MAINTENANCE" dieses Handbuchs für spezifische Einstellinformationen. Bitte beachten Sie diese Anleitung für wichtige allgemeine Gebrauchsanweisungen für das Light Relief® Gerät.

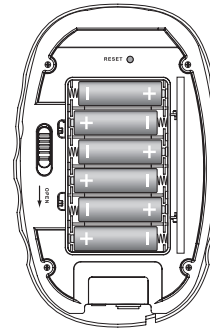


Fig. 20

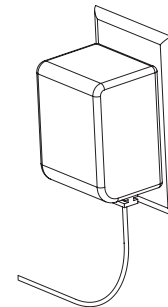


Fig. 21

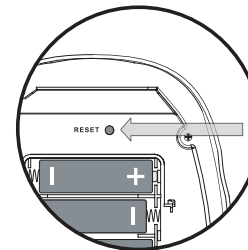


Fig. 22

#### **BESTELLEN DES LIGHT RELIEF® ZUBEHÖRS**

Ab sofort ist Zubehör erhältlich, um das Erlebnis mit dem Light Relief® zu verbessern. Bitte kontaktieren Sie uns unter **800-743-9852** oder besuchen Sie [www.lighrelief.com](http://www.lighrelief.com) um noch heute Ihr exklusives Light Relief® Zubehör zu bestellen.

#### **PROBLEMBEHEBUNG:**

Wenn das Gerät nicht funktioniert:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind (Fig. 20).
- Ersetzen Sie die Batterien.
- Warten Sie 30 Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und versuchen Sie es erneut.

*Wenn Sie den Poweradapter benutzen:*

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist (Fig. 21).
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel vom Netzteil zum LR150 vollständig in die mit "DC IN 9V 1A" gekennzeichnete Buchse auf der Oberseite des Gerätes eingesteckt ist.
- Drücken Sie den Reset-Knopf im Inneren des Gehäuses (Fig. 22).

#### **Das aufladbare Batterie-Set:**

*Batterien wiederaufladen:*

- Stellen Sie sicher, dass das Ladeadapter in die Steckdose eingesteckt ist (Fig. 21).



## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. Light Relief, LLC gibt keine Ansprüche, Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Fähigkeit dieses Produkts, körperliche oder geistige Beschwerden zu heilen. Bei allen Erkrankungen, die eine medizinische Behandlung erfordern, sollte ein qualifiziertes medizinisches Fachpersonal hinzugezogen werden.

## LIGHT RELIEF® GARANTIE

(2-Jahres-Garantie)

Für Ihr Light Relief® wird eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Sollte das Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, reparieren oder ersetzen wir es kostenlos für Sie (es wird eine Versand- und Bearbeitungsgebühr erhoben). Um einen Service im Rahmen der Garantie zu erhalten, rufen Sie einfach unser Kundendienstzentrum unter der gebührenfreien Telefonnummer **800-743-9852** an. Die Light Relief® Einheit hat eine Mindestlebensdauer von zwei (2) Jahren. Wir empfehlen, das Gerät nach dieser Zeit auszutauschen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder eine andere als die in diesem Produkthandbuch beschriebene Verwendung verursacht werden, oder auf Schäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Produkthandbuch beschriebenen Wartung und Reinigung dieses Produkts entstehen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer der Light Relief®.

**ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIE FÜR DIESES PRODUKT, EINSCHLIEßLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE LAUFZEIT DER GARANTIE BESCHRÄNKT, UND NACH DIESEM ZEITRAUM GELTEN KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT.**

Einige Staaten erlauben keine Begrenzung der Dauer impliziter Garantien, so dass die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt. Diese Garantie gibt Ihnen zwar spezifische Rechtsansprüche, aber Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können.

### Kontaktdaten für den Garantieservice:

Light Relief, LLC  
P.O. Box 9169 | Van Nuys, CA | 91409  
1.8 0 0.743.9 852 | [www.lightrelief.com](http://www.lightrelief.com)

© 2006-2013 Light Relief, LLC. All Rights Reserved.



## SCHIEDSVEREINBARUNG

**BITTE LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH. SIE AKZEPTIEREN DIE BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG, INDEM SIE DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG GELIEFERTEN PRODUKTE (DIE "PRODUKTE") FÜR MEHR ALS DREIßIG (30) TAGE NACH EINGANG AUFBEWAHREN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE DAS PRODUKT INNERHALB VON DREIßIG (30) TAGEN NACH ERHALT AN DAS UNTERNEHMEN ZURÜCKSENDEN, UM EINE VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG ZU ERHALTEN.**

**DIESE SCHIEDSVEREINBARUNG ("VEREINBARUNG") BETRIFFT IHRE GESETZLICHEN RECHTE UND RECHTSBEHELFE, INDEM SIE VORSIHT, DASS STREITIGKEITEN ZWISCHEN IHNEN UND DEM HERSTELLER, HÄNDLER UND/ODER VERKÄUFER DIESES PRODUKTS (ZUSAMMEN "UNTERNEHMEN") DURCH EIN VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN UND NICHT VOR GERICHT BEIGELEGT WERDEN MÜSSEN. SIE SIEHT AUCH VOR, DASS STREITIGKEITEN NICHT BEIGELEGT WERDEN KÖNNEN. IN EINER SAMMELKLAGE ODER EINEM ANDEREN VERFAHREN, IN DEM SIE ANDERE PERSONEN ODER ANDERE PERSONEN VERTRETEN, UND DASS KEINE SAMMEL- ODER SCHIEDSVERFAHREN ZULÄSSIG SIND. BITTE LESEN SIE ALLE BEDINGUNGEN IN DIESER VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH.**

### 1. BEILEGUNG VON ANSPRÜCHEN ODER STREITIGKEITEN.

Jegliche Ansprüche oder Streitigkeiten zwischen Ihnen und dem Unternehmen (oder einer der Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen des Unternehmens), die sich aus oder in Bezug auf das Produkt oder diese Vereinbarung ergeben, werden durch ein abschließendes, verbindliches Schiedsverfahren beigelegt. Diese Schiedsgerichtsverpflichtung ist sowohl für Sie als auch für das Unternehmen gegenseitig bindend und gilt unabhängig davon, ob es sich bei der Forderung oder dem Streit um eine unerlaubte Handlung, Betrug, Falschdarstellung, Produkthaftung, Fahrlässigkeit, Verletzung eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsgrundlage handelt. Sowohl Sie als auch das Unternehmen erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass Sie auf Ihr Recht verzichten, eine Klage auf der Grundlage solcher Ansprüche oder Streitigkeiten einzureichen und diese Klage von einem Richter oder einer Jury lösen zu lassen.

### 2. EINSCHRÄNKUNG DER RECHTSBEHELFE.

Alle Schiedsverfahren im Rahmen dieser Vereinbarung werden auf individueller (und nicht auf klassenweiter) Basis durchgeführt, und ein Schiedsrichter ist nicht befugt, klassenweite Rechtsbehelfe zu gewähren. Sie erkennen an und stimmen zu, dass diese Vereinbarung Ihnen und dem Unternehmen ausdrücklich untersagt, als Vertreter anderer ein Schiedsverfahren einzuleiten oder sich an einem von einer anderen Person eingeleiteten Schiedsverfahren zu beteiligen. Die Parteien vereinbaren, dass keine Sammel- oder Repräsentativklagen jeglicher Art zulässig sind.

### 3. SCHIEDSVERFAHREN.

- a. Bevor Sie ein Schiedsverfahren einleiten, empfehlen wir Ihnen dringend, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen, um zu versuchen, die Angelegenheit unter der Telefonnummer 800-218-3560 zu lösen, obwohl Sie dazu nicht verpflichtet sind.
- b. Das Schiedsverfahren für alle Ansprüche oder Streitigkeiten im Rahmen dieser Vereinbarung wird in Übereinstimmung mit den beschleunigten Verfahren durchgeführt, die in den umfassenden Schiedsgerichtsregeln und -verfahren von JAMS festgelegt sind, wenn diese Regeln zum Zeitpunkt des Erhalts des Produkts, einschließlich der Regeln 16.1 und 16.2 dieser Regeln, bestehen. Diese Regeln und Verfahren sind verfügbar, indem Sie JAMS anrufen oder die Website unter [www.jamsadr.com](http://www.jamsadr.com) besuchen. Die Schiedsgerichtsbestimmungen dieser Vereinbarung und alle Schiedsverfahren, die gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung durchgeführt werden, unterliegen dem Federal Arbitration Act (9 U.S.C. Sec. 1-16). In diesem Zusammenhang erkennen die Parteien an, dass es sich bei dieser Vereinbarung um eine Transaktion im zwischenstaatlichen Handel handelt. Andernfalls unterliegen dieser Vertrag und die Rechte der Parteien aus diesem Vertrag den Gesetzen des Staates Kalifornien und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, mit Ausnahme von Kollisionen oder Rechtswahlregeln. Das Schiedsverfahren über alle Ansprüche oder Streitigkeiten im Rahmen dieser Vereinbarung wird von einem Schiedsrichter durchgeführt, der über eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Durchführung von Schiedsverfahren verfügt.
- c. Das Schiedsverfahren über alle Ansprüche oder Streitigkeiten im Rahmen dieser Vereinbarung wird im Staat Kalifornien oder an dem Ort, an dem Sie diese Vereinbarung erhalten haben, durchgeführt. Bei Ansprüchen von 10.000 \$ oder weniger können Sie wählen, ob das Schiedsverfahren persönlich, telefonisch oder nur auf der Grundlage von Einreichungen durchgeführt wird.
- d. Die Gesellschaft trägt die Kosten für die Schlichtung von Ansprüchen, einschließlich der JAMS Case Management Fee und aller Honorare für die Bearbeitung von Ansprüchen.
- e. Schiedsrichterdienste. Die Gesellschaft trägt die Gebühren und Kosten ihrer eigenen Anwälte, Sachverständigen und Zeugen und kann diese nicht von Ihnen zurückfordern, auch wenn Sie das Schiedsverfahren nicht gewinnen. Sofern gesetzlich nicht anders vorgesehen, erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie die Gebühren und Kosten für Ihren eigenen Anwalt, Experten und Zeugen übernehmen.

### 4. CHOICE OF LAW.

Die Schiedsgerichtsbestimmungen dieser Vereinbarung und alle Schiedsverfahren, die gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung durchgeführt werden, unterliegen dem Federal Arbitration Act (9 U.S.C. Sec. 1-16). In diesem Zusammenhang erkennen die Parteien an, dass es sich bei dieser Vereinbarung um eine Transaktion im zwischenstaatlichen Handel handelt. Andernfalls unterliegen dieser Vertrag und die Rechte der Parteien aus diesem Vertrag den Gesetzen des Staates Kalifornien und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, mit Ausnahme von Kollisionen oder Rechtswahlregeln.

### 5. TRENNBARKEIT.

Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung für rechtswidrig, nicht durchsetzbar oder ungültig erklärt oder befunden wird, ist diese Bestimmung nur insoweit unwirksam, als sie für rechtswidrig, nicht durchsetzbar oder ungültig befunden wird, und der Rest der Bestimmung und alle anderen Bestimmungen bleiben vollständig durchsetzbar.

